

Результат в правильном свете

Мы рекомендуем комбинацию системы ENDO-CAM® Performance HD с нашими превосходными светодиодными источниками света. Они отличаются долгим сроком службы светозлемента, что

значительно сокращает эксплуатационные расходы. Равномерное освещение и естественная цветопередача положительно сказываются на эндоскопической картине.

ENDOCAM® Performance HD + ENDOLIGHT LED 1.1



- ☐ Мощность освещения двух светодиодных источников света соответствует 180 Ватт ксенонового света
- ☐ Управление светом вручную
- ☐ Соединительный разъем Wolf для гибких световодов

ENDOCAM® PERFORMANCE HD + ENDOLIGHT LED 1.2



- Для всех, кто хочет большего. Повышенный комфорт и другие высокотехнологичные опции делают данный комплект оптимальным выбором даже для очень требовательных пользователей.
- ☐ Многофункциональный разъем для световодов от разных производителей
 - ☐ Дистанционное управление режимом ожидания
 - ☐ Распознавание световода: в режим ожидания, если световод удален
 - ☐ Функция БЕЗОПАСНЫЙ СТАРТ: При прерывании подачи рабочего напряжения менее чем на 10 секунд источник света включается снова автоматически. После продолжительного прерывания подачи напряжения высокоомощный источник света в целях безопасности переключается в режим ожидания.

Комплект ENDOCAM® PERFORMANCE HD 50 Гц состоящий из:
контроллера ENDOCAM® PERFORMANCE HD (5514101), основного оптического механизма камеры ENDOCAM® PERFORMANCE, 60 Гц (5514961), USB Flash-накопителя 8 ГБ (56540028), кабеля HDMI / DVI-D с блокировкой 3,0 (103843), провода дистанционного управления 1,5 м (5502991), сетевого кабеля (2440.03)..... 5514001

ENDOCAM® PERFORMANCE HD (5514101), основного оптического механизма камеры ENDOCAM® PERFORMANCE, 60 Гц (5514961), USB Flash-накопителя 8 ГБ (56540028), кабеля HDMI / DVI-D с блокировкой 3,0 (103843), провода дистанционного управления 1,5 м (5502991), сетевого кабеля (2440.03)..... 5514601

ЗУМ-ОБЪЕКТИВ RIWO

Для датчиков камер 1/2", фокусное расстояние: $f = 21-36$ мм
.....85261.501



Для универсального применения.



ОБЪЕКТИВ RIWO


с резьбой C-mount и поворотным взводным фиксатором, стерилизуется погружением в раствор или в автоклаве.
Фокусное расстояние: $f = 24$ мм
.....85261.242
Фокусное расстояние: $f = 32$ мм
.....85261.322



Для использования в сочетании с эндоскопами диаметром < 7 мм.



Для использования в сочетании с эндоскопами 7 мм

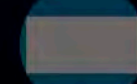

УГЛОВОЙ ОБЪЕКТИВ RIWO

$f = 24$ мм, с поворотным взводным затвором и резьбой C-mount, делитель луча - в глаз - 10 %, в камеру - 90 %, иммерсионный
.....5257.271



Для использования в сочетании с эндоскопами 4 мм



Комплект ENDOLIGHT LED 1.1 состоящий из:
ENDOLIGHT LED 1.1 (5160001)
сетевой кабель (244003)
.....51600011

Комплект ENDOLIGHT LED 1.2 состоящий из:
ENDOLIGHT LED 1.2 (5161001)
сетевой кабель (244003)
.....51610011

MT ТЕХНИКА

Эксклюзивный дистрибьютер, авторизованный сервисный центр Richard Wolf GmbH в России
125252, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, корпус Б
Телефон/Факс: (495) 744-00-35
e-mail: info@mttechnica.ru http://www.mttechnica.ru

RICHARD
WOLF

дух совершенства

mst
Multi-Systems Technology

Официальный дистрибьютор в России:
119435, Москва, ул. Малая Пироговская,
д.18, оф. 101, Тел.: +7 (495) 737 81 26
http://www.mst.ru/ info@mst.ru

RICHARD
WOLF

Визуализация



Эффективность в фокусе –
безупречный обзор

ENDOCAM® PERFORMANCE HD

Система ENDOCAM® Performance HD

Максимум эффективность, минимум расходов



Наша новая система видеокамер, выполненных по однокриптовой технологии, задает новые стандарты эффективности. Система ENDO-CAM® Performance HD предлагает максимальную эффективность по привлекательной цене.

Безупречный обзор
С технологией HD достигается идеальное четкое изображение.

Чёткость в деталях
Чрезвычайно высокая светочувствительность и естественная цветопередача обеспечивают чёткость изображения всех деталей. Благодаря цифровой обработке изображения (D.I.P.) происходит постоянная оптимизация изображения за счет непрерывного контроля процесса передачи цифрового сигнала.

USB-накопитель
Система ENDOCAM® Performance HD позволяет сохранить изображение одним нажатием кнопки. Изображения и видеоряды с основного оптического механизма камеры передаются прямо на USB-накопитель.

Гибкость на все случаи жизни
Система ENDOCAM® Performance HD идеально подходит для междисциплинарного применения в области эндоскопии.

Комфорт в Ваших руках
Простое интуитивное управление обеспечивает удобство в использовании системы ENDOCAM® Performance HD.


Надежное соединение в любых ситуациях

Система ENDOCAM® Performance HD разработана для универсального эндоскопического применения. Возможность разностороннего применения системы в особой степени обеспечивается за счет соединения C-Mount. С его помощью достигается прямое соединение видеокамеры с эндоскопом. Объективы C-Mount доступны для разных областей применения и оптимально подходят для видеокамеры и эндоскопа.

ENDOCAM® Performance HD

для жестких эндоскопов


Сочетание камеры с зум-объективом позволяет её использовать во всех разделах эндоскопии.

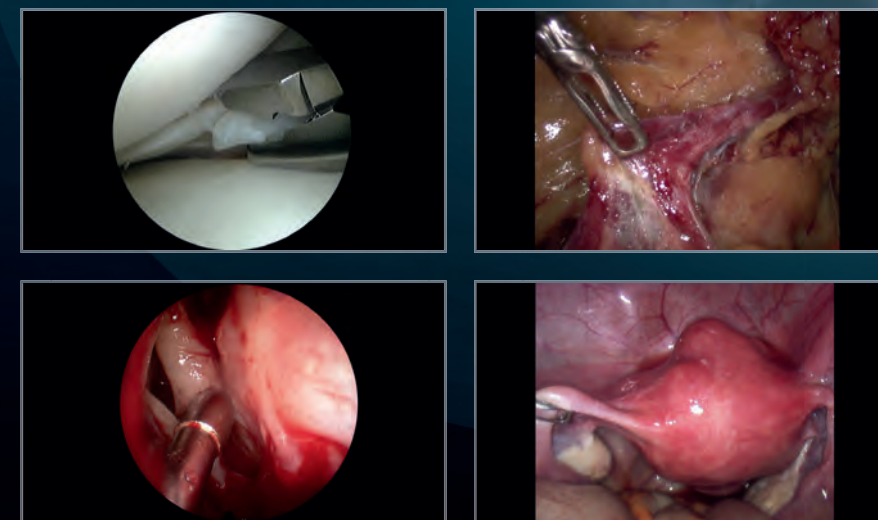

ENDOCAM® Performance HD

для эндоскопической резекции

Наш маятниковый объектив C-Mount оптимизирует систему ENDOCAM® Performance HD для выполнения резекций и для любого применения, при котором эндоскоп используется со свободным вращением.

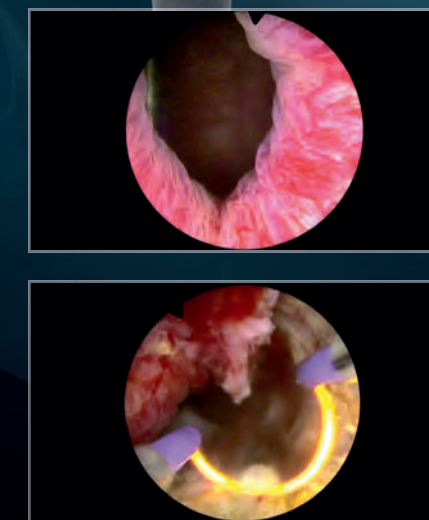

ENDOCAM® Performance HD

для гибких эндоскопов

Для гибких эндоскопов тоже есть подходящая комбинация: объективы C-Mount с оптимизированным фиксированным фокусным расстоянием или зум-объективом обеспечивают нужное кадрирование, а цифровой антимуаровый фильтр оптимизирует результат.

